


LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE

It's As Easy as **READY, SET, LANCE!**

For obtaining capillary whole blood for testing.

Note: Lancing Device and Clear End Cap are for self-testing and intended for use by one patient only. Not suitable for use by healthcare or care workers.

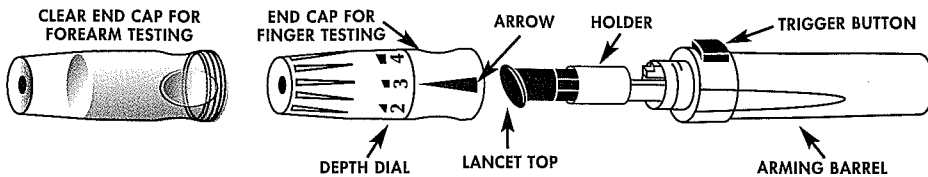

- R E A D Y -

1 Select area to be lanced. Wash with soap and warm water, rinse and dry thoroughly.

2 Twist off End Cap. Push Lancet firmly into Holder.

3 Remove Lancet Top. **Note: Save Top for safe disposal of used Lancet.**

4 Replace End Cap. **Note: Use clear End Cap for lancing forearm.**

Important Notes Regarding Forearm Samples Used in Testing Blood Glucose:

- Check with your Doctor or Diabetes Healthcare Professional to see if forearm testing is right for you.
- Blood glucose results from forearm are not always the same as results from fingertip. Do not use forearm for testing when blood sugar is rapidly rising or falling, e.g., within 2 hours of eating, after taking insulin, immediately after exercise, or when you are ill or under stress. Use fingertip sample for testing.
- Do not use forearm samples for testing if you think your blood sugar is low, if you don't regularly experience symptoms when your blood glucose is low, or if your results from forearm samples do not match the way you feel. Use fingertip sample for testing.¹


- S E T -

For Finger Testing:

- 1 Turn Depth Dial to desired lancing depth.
Note: Finer adjustments can be made by setting Arrow between numbers.

Lancing Depth Guide:

- 1-2 for soft / thin skin
- 3-4 for average skin (shown)
- 4-5 for thick / calloused skin

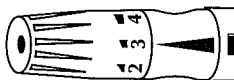


2 Lower hand to waist level. Gently massage finger to get blood flowing.

3 Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until a click is heard.

For Forearm Testing:

- 1 Use Clear End Cap in place of regular Depth Dial End Cap, but if Clear End Cap is not available, select #5 on Depth Dial.

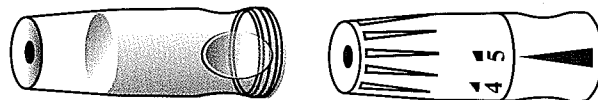


2 Rub area vigorously or apply warm compress to stimulate blood flow.

3 Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until a click is heard.

- L A N C E -

1 Place Tip firmly against finger on other hand.
Note: For best results, lance in shaded areas.

Note: For best results, lance in shaded areas.

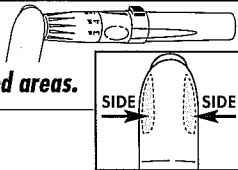


2 Press Trigger Button.

3 Gently massage finger from palm to fingertip to form blood drop.

1 Place Tip firmly against forearm.
Note: For best results, lance in shaded area.

2 Press Trigger Button.

3 Apply a firm pressure on the Lancing Device until an adequate blood drop is formed.

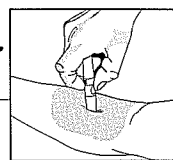

• Refer to Owner's Booklet for testing instructions. •

Cleaning Lancing Device:

1. Remove End Cap.
2. Wash Cap with soap and warm water, rinse and dry thoroughly.
3. Replace End Cap.
4. Wipe outside of Lancing Device with 70% rubbing alcohol or mild soap and water.

Removing Used Lancet:

1. Twist off End Cap of Lancing Device.
2. Using saved Top, recap Lancet.
3. Remove from Holder and discard Lancet in appropriate container.

SYMBOLS LEGEND:

STERILE Sterile

Single Use Only

Attention! See Instructions for Use

LOT Lot Number

IVD For *in vitro* Diagnostic Testing Only

REF Catalog Number

For Assistance Call

1. Food and Drug Administration 2006, Diabetes Information - Glucose Meters and Diabetes Management, New Technologies: Alternative Site Testing [Electronic Version]. Retrieved February 17, 2006 from www.fda.gov/diabetes/glucose.html#11.

© 2008 Home Diagnostics, Inc. The Home Diagnostics logo is a trademark of Home Diagnostics, Inc. • Made in China

HOMEdiagnostics

Fort Lauderdale, FL 33309 USA
www.homediagnostics.com
800-803-6025 954-677-9201

U.S. and International Patents Pending. A2HD106 Rev. 4

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL INSTRUMENTO DE PUNCIÓN


Tan fácil como decir ¡EN SUS MARCAS!, ¡LISTOS!, ¡YA! Úselo en la obtención de sangre total capilar para el análisis de la glucosa en la sangre.

Nota: el instrumento de punción y la tapa con extremo transparente sirven para las pruebas autoadministradas y son para uso en un solo paciente. No es apto para uso por parte de los profesionales de atención o cuidado de la salud.

TAPA TRANSPARENTE PARA ANÁLISIS CON SANGRE DEL ANTEBRAZO



TAPA PARA ANÁLISIS CON SANGRE DE LOS DEDOS

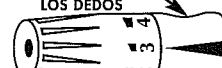

FLECHA

SOPORTE

BOTÓN DE ACTIVACIÓN

INDICADOR DE PROFUNDIDAD


CUBIERTA DE LA LANCETA

CUERPO


- ¡ EN SUS MARCAS ! -

1 Seleccione el área de punción. Lave con agua tibia y jabón, enjuague y seque bien.


2 Gire la tapa para retirarla. Presione la lanceta firmemente en el soporte.

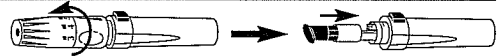

3 Retire la cubierta de la lanceta. **Nota: Consérvela para desechar con seguridad la lanceta usada.**

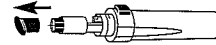

4 Coloque nuevamente la tapa. **Nota: Utilice la tapa transparente para punzar el antebrazo.**

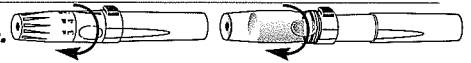

Importantes notas relacionadas con las muestras obtenidas en el antebrazo para el análisis de la glucosa en la sangre:

- Pregunte a su médico o profesional de atención de la salud si el análisis practicado con muestras de sangre del antebrazo es apropiado en su caso.
- Los resultados de la glucosa en la sangre obtenidos de esta manera no siempre son tan precisos como los conseguidos utilizando la sangre del dedo. Para lograr una mayor exactitud en los resultados de la glucosa en la sangre, se recomienda no utilizar la sangre del antebrazo durante las 2 horas siguientes a las comidas, luego de haberse inyectado insulina, inmediatamente después de hacer ejercicios, o en caso de enfermedad o estrés. En tales situaciones, deberá utilizarse la yema del dedo para obtener la muestra de sangre.
- Si cree que su glucosa en la sangre está baja, si normalmente no presenta síntomas cuando disminuye su nivel de azúcar en sangre, o si los resultados de las muestras sanguíneas obtenidas del antebrazo no coinciden con lo que siente, no utilice las muestras de sangre obtenidas de su antebrazo para el análisis. En lugar de ello, utilice la sangre obtenida de la yema de sus dedos.¹

- ¡ LISTOS ! -


Para el análisis con sangre obtenida de la yema de los dedos:

1 Gire el dial de profundidad hasta el nivel deseado de perforación.

Nota: Es posible ajustar la precisión colocando la flecha entre los números.


Guía de profundidad:

- 1 a 2 para piel delicada/delgada
- 3 a 4 para piel normal (ver ilustración)
- 4 a 5 para la piel gruesa / con callosidades

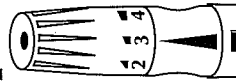


2 Coloque la mano a la altura de la cintura. Masajee el dedo ligeramente para aumentar el flujo sanguíneo.

3 Sostenga la tapa con una mano y el cuerpo con la otra. Hale suavemente el cuerpo hasta escuchar un chasquido.

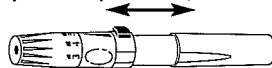


Para el análisis con sangre obtenida en el antebrazo:

1 Utilice la tapa transparente en lugar de la tapa regular del indicador de profundidad. Sin embargo, si no se dispone de la tapa transparente, seleccione el #5 en el indicador de profundidad.

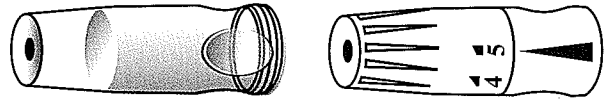

2 Frote bien el área o coloque compresas tibias para estimular el flujo sanguíneo.


3 Sostenga la tapa con una mano y el cuerpo con la otra. Hale suavemente el cuerpo hasta escuchar un chasquido.

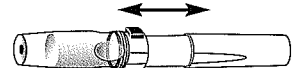

- ¡ YA ! -

1 Coloque con firmeza la punta sobre un dedo de la mano contraria.

Nota: Para obtener mejores resultados, punce las áreas laterales.

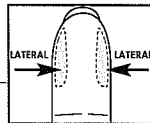


2 Presione el botón de activación.

3 Masajee ligeramente la palma de la mano hacia el dedo para ayudar a formar una gota de sangre.

1 Coloque con firmeza la punta sobre el antebrazo.

Nota: Para obtener mejores resultados, punce el área sombreada (ver gráfico).

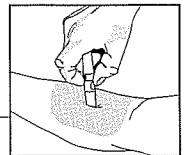

2 Presione el botón de activación.

3 Ejercer presión firme sobre el instrumento de punción hasta obtener una gota de sangre adecuada.

• Vea en la libreta del propietario las instrucciones para practicar el análisis •

Limpieza del instrumento de punción:

1. Retire la tapa.
2. Lave la tapa con agua tibia y jabón. Enjuáguela y séquela bien.
3. Coloque nuevamente la tapa en su lugar.
4. Utilice alcohol al 70 % o agua y jabón suave para limpiar la parte exterior del instrumento de punción.

Extracción de la lanceta usada:

1. Gire la tapa del instrumento de punción para quitarla.
2. Use la tapa guardada para tapar de nuevo la lanceta.
3. Retire la lanceta del soporte y deséchela en un recipiente apropiado.

LEYENDAS DE LOS SÍMBOLOS:

STERILE R Estéril



Exclusivamente para un solo uso



¡Atención! Lea las instrucciones para el uso

LOT Número de lote

IVD Exclusivamente para análisis diagnóstico in vitro

REF Número de catálogo

Para solicitar ayuda, llame al

¹ Food and Drug Administration 2006, Diabetes Information - Glucose Meters and Diabetes Management, New Technologies: Alternative Site Testing [Electronic Version]. Retrieved February 17, 2006 from www.fda.gov/diabetes/glucose.html#11.

Hecho en China

HOMEdiagnostics

Fort Lauderdale, FL 33309 USA
www.homediagnosics.com
800-803-6025 954-677-9201

Patentes en EE.UU. e internacionales en trámite.